


SureForm von da Vinci-Stapling

Erreichen Sie mehr mit Ihrem Stapler.

Im Zentrum steht die SmartFire-Technologie, die die Gewebekompression vor und während des Auslösevorgangs überwacht. Mit über 1.000 Messungen pro Sekunde¹ nimmt SmartFire automatisch Anpassungen vor, um die Klammernaht zu optimieren und Gewebeschäden zu verhindern - über verschiedene Gewebedicken hinweg.¹ Der Gelenkkonus von 120 Grad gibt Ihnen die Freiheit, sich dem Gewebe in seiner anatomischen Position zu nähern. Dies reduziert potenziell die Notwendigkeit, das Gewebe zum Stapler hinzuziehen.¹ Wenn Sie sich für SureForm entscheiden, können Sie Unsicherheiten verringern und die Klammerleistung wie niemals zuvor erhöhen.¹

SureForm Stapler sind für eine Klammernahtlänge von 45 mm und 60 mm erhältlich. SureForm 45 mm- und 60 mm-Magazine enthalten sechs Klammerreihen und eine neue Klinge mit jedem Magazin.

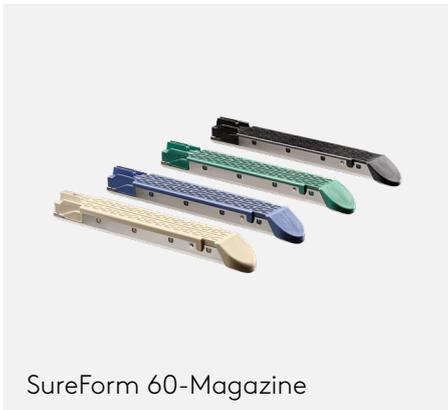


SureForm 60-Magazine

- Magazine in Weiß, Blau, Grün und Schwarz
- 6 Klammerreihen
- Neue Klinge mit jedem Magazin



SureForm 60

- 60 mm Klammernahtlänge/55 mm Schnittlinie
- Ambosszentriertes Design
- Gegenlager mit gerader Spitze
- Anwendung durch einen 12 mm Trokar
- 12 Auslösungen pro Magazin
- Einweginstrument

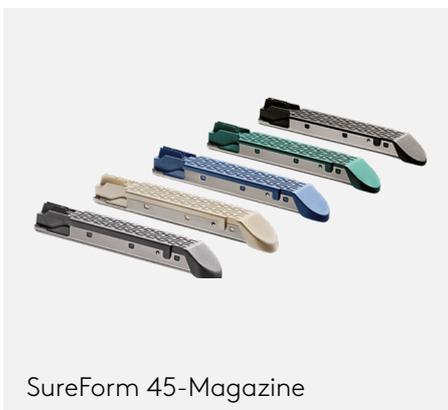

SureForm 45-Magazine

- Magazine in Grau, Weiß, Blau, Grün und Schwarz
- 6 Klammerreihen
- Neue Klinge mit jedem Magazin



SureForm 45

SureForm 45 mit gebogener Spitze

- 45 mm Klammernahtlänge/40 mm Schnittlinie
- Ambosszentriertes Design
- Gegenlager mit gerader oder gebogener Spitze
- Anwendung durch einen 12 mm Trokar
- 12 Auslösungen pro Magazin
- Einweginstrument

Bestellinformationen

SureForm Stapler

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Verwendung	Menge/Packung
480460	SureForm 60 Stapler	Einweg	6
480445	SureForm 45 Stapler	Einweg	6
480545	SureForm 45 Stapler mit gebogener Spitze	Einweg	6

Magazine für SureForm Stapler

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Verwendung	Menge/Packung
48360W	SureForm 60 Magazin, weiß (2,5 mm, 6 Reihen)	1 Auslösung	12
48360B	SureForm 60 Magazin, blau (3,5 mm, 6 Reihen)	1 Auslösung	12
48360G	SureForm 60 Magazin, grün (4,3 mm, 6 Reihen)	1 Auslösung	12
48360T	SureForm 60 Magazin, schwarz (4,6 mm, 6 Reihen)	1 Auslösung	12
48345M	SureForm 45 Magazin, grau (2,0 mm, 6 Reihen)	1 Auslösung	12
48345W	SureForm 45 Magazin, weiß (2,5 mm, 6 Reihen)	1 Auslösung	12
48345B	SureForm 45 Magazin, blau (3,5 mm, 6 Reihen)	1 Auslösung	12
48345G	SureForm 45 Magazin, grün (4,3 mm, 6 Reihen)	1 Auslösung	12
48345T	SureForm 45 Magazin, schwarz (4,6 mm, 6 Reihen)	1 Auslösung	12

Bestellinformationen (Fortsetzung)

12 mm Stapling-Zubehör

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Verwendung	Menge/Packung
470375	12 mm -Kanüle für Stapler (100 mm)	n. v.	1
470376	12 mm und Obturator für Stapler, stumpf	n. v.	1
470389	12 mm Kanüle für Stapler, lang (150 mm)	n. v.	1
470390	12 mm und Obturator für Stapler, stumpf, lang	n. v.	1
470380	12 mm und Kanülendichtung für Stapler (10er-Packung)	1 Prozedur	10
470381	Reduzierhülse, 12 mm auf 8 mm (6er-Packung)	1 Prozedur	6
470395	12 mm und Obturator für Stapler, ohne Klinge	n. v.	1
470396	12 mm und Obturator für Stapler, ohne Klinge, lang	n. v.	1

Erfahren Sie mehr über die da Vinci-Stapler und besuchen Sie unsere Website unter:

www.intuitive.com/de-de

Um eine Ansprechperson zu kontaktieren oder weitere Informationen zu erhalten:

Besuchen Sie www.intuitive.com/de-de oder rufen Sie den Kundenservice von Intuitive an:

Europa

+41.21.821.2020 oder
+800.0821.2020 (gebührenfrei)

Produktinformation

SureForm 45 und 60

Die Klammernahtgeräte SureForm 60 und SureForm 45, die SureForm 60- und SureForm 45-Magazine sind für die Verwendung mit dem da Vinci-Chirurgiesystem für die Resektion, Transsektion und/oder das Erstellen von Anastomosen in der allgemeinen, thorakalen, gynäkologischen, urologischen und pädiatrischen Chirurgie vorgesehen. Die Geräte können mit Klammernahtlinien- oder Gewebestützmaterial (natürliches oder synthetisches) verwendet werden.

Die Klammernahtgeräte SureForm 60 und SureForm 45, die SureForm 60- und SureForm 45-Magazine sind Medizinprodukte der Klassen IIa und IIb mit CE-Kennzeichnung (CE 2460) gemäß der europäischen Medizinprodukte-Richtlinie (93/42/EWG), hergestellt von Intuitive Surgical, Inc. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung.

Rechtliche Hinweise

Die individuellen Ergebnisse können von einer Reihe von Faktoren abhängen, unter anderem von Patientenmerkmalen, Krankheitsmerkmalen und/oder der Erfahrung des Operateurs.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden mit größter Sorgfalt geprüft und zusammengestellt. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird jedoch keine Gewähr übernommen. Allein der Empfänger ist dafür verantwortlich, alle Informationen zu prüfen, bevor er diese im individuellen Fall anwendet.

Einige Produkte, Funktionen oder Technologien sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Intuitive-Ansprechpartner vor Ort nach der Verfügbarkeit der Produkte in Ihrer Region.

Angaben zu Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen und anderen Produktinformationen finden Sie in der produktspezifischen Gebrauchsanweisung.

Datenschutzhinweis

Die Datenschutzbestimmungen von Intuitive sind unter www.intuitive.com/privacy verfügbar.

© 2023 Intuitive Surgical Operations, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Produkt- und Markennamen/Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Intuitive Surgical oder deren jeweiligen Eigentümern.