



INTUITIVE

# Da Vinci SP

Move surgery forward. Again.

# Move surgery forward. Again.

Da Vinci SPサージカルシステムはシングルポートでの  
ロボット支援手術を実現できるサージカルプラットフォームです。

アームの干渉に制限されない様々なサージカルアクセスが可能な為、  
シンプルな手術から複雑な手術まで  
医師と患者に低侵襲治療の新たな選択肢と  
クリニカルバリューを提供します。



# Discover the versatility

シングルアームのユニークなペイシェントカートデザインにより  
様々なサージカルアクセスが可能に



# Empowering surgeons

Da Vinci SPサージカルシステムにより  
シングルポートで実施可能なロボット支援手術例

---

## 01

単一切開または経管腔による  
狭い術野での手術  
(経口手術)

---


## 02

検体摘出部位からの手術  
(後腹膜腎部分切除術<sup>1</sup>)

---

## 03

代替アクセスによる手術  
(経腹/後腹膜前立腺全摘術)  
(子宮全摘術)

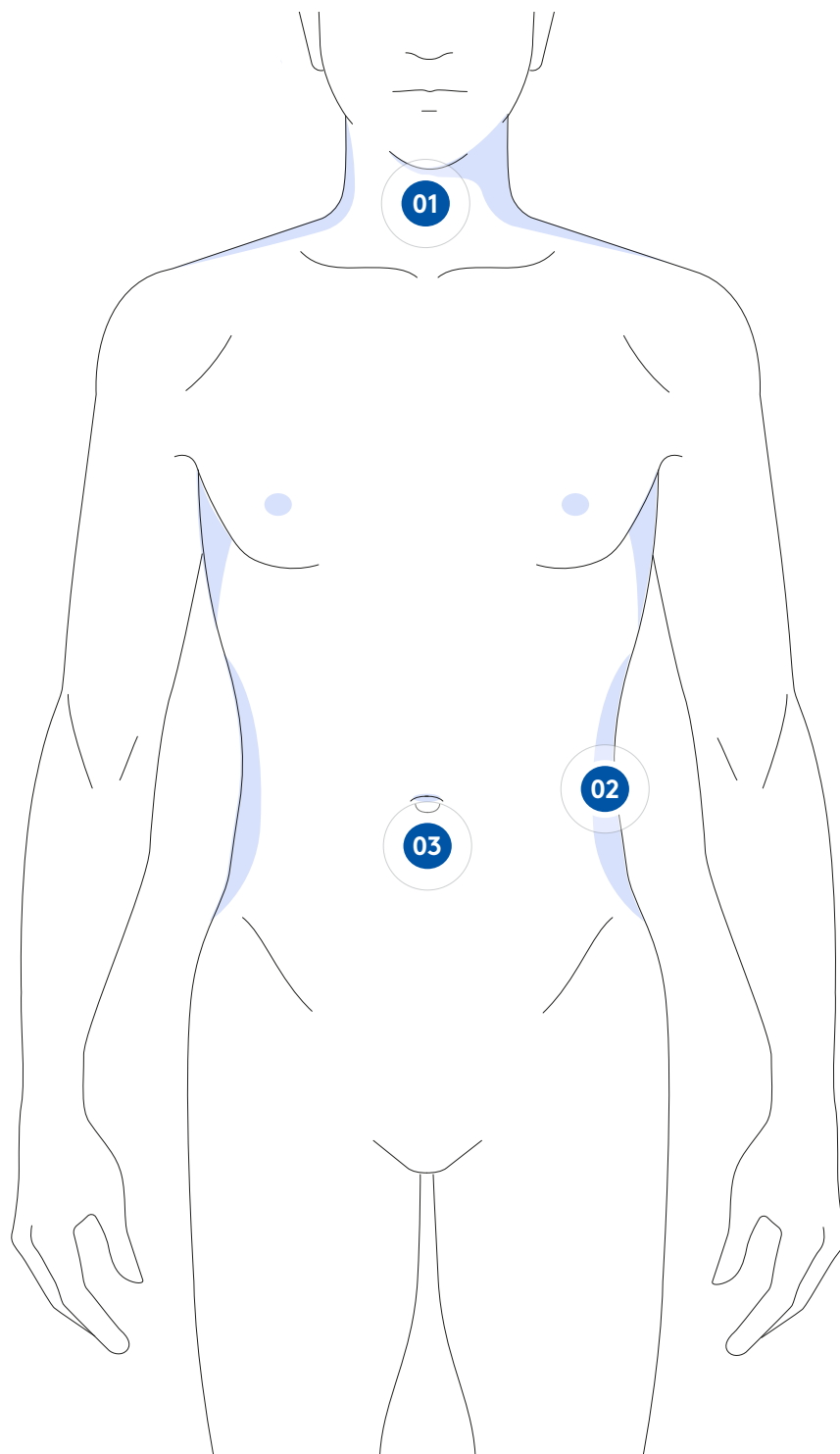

<sup>1</sup> SPアクセスポートキットが必要です

# A newly imagined patient cart

360°の解剖学的アクセスが可能なペイシェントカート

## 配置するポートは1つ

腹部4象限すべてにドッキングし直すことなくアクセス可能

## 外部アーム間の干渉を排除

Da Vinci SP独自のペイシェントカート設計により、外部アーム同士の干渉を排除







# See above, below\*, and around anatomy

シングルポートロボット支援手術に最適化された  
da Vinci SPカメラ

手首関節機能を搭載したda Vinci SPカメラ  
は角度・方向を自由に操作可能



30° down




0°



30° up

Firefly機能により、近赤外線光が照射可能

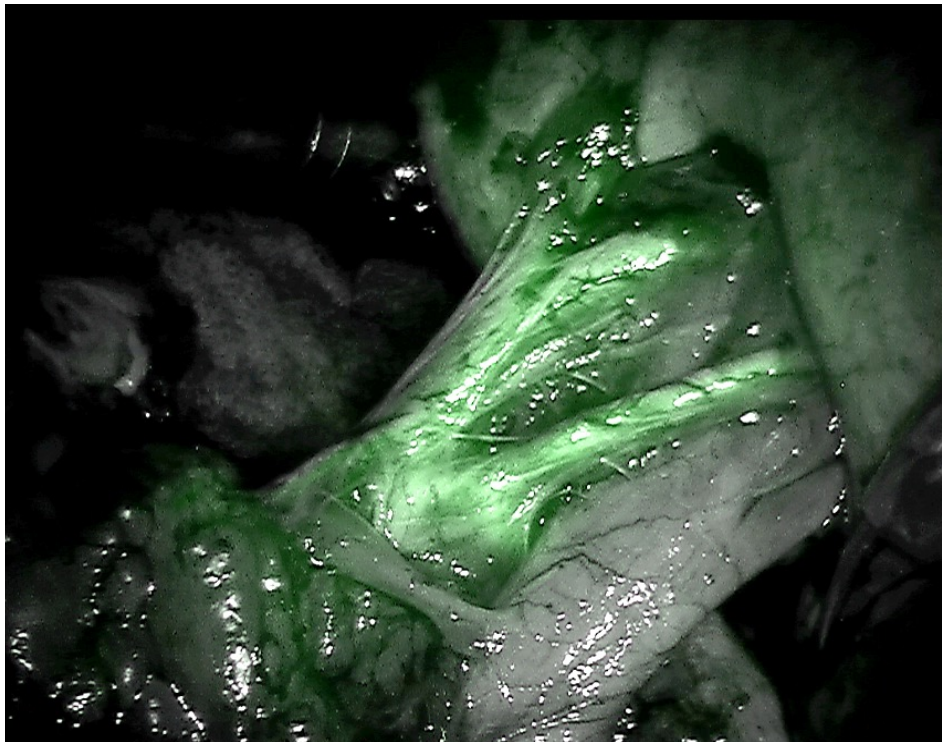

Firefly

\* Camera Above/Belowモードを変更することで180度回転させることができる



---

# Optimized for single-port surgery

シングルポートから  
3本のインストゥルメントを操作可能

---

精緻な縫合、剥離操作を可能にするSP専用  
6mmインストゥルメント



---

インストゥルメントは遠位端にエルボーと  
リストの2つの関節機能を備え、体腔内で  
柔軟に屈曲



# System comparison



Core technology	Da Vinci X	Da Vinci Xi	Da Vinci SP
インテュティブモーション	✓	✓	✓
EndoWrist インストゥルメント	✓	✓	✓
3DHD ステレオビューア	✓	✓	✓
ソフトウェアアップグレード	✓	✓	✓
シングルポートテクノロジー	-	-	✓
<b>Technology enhancements</b>			
デュアルコンソール	✓	✓	✓
SureForm ステープラー	✓	✓	-
バイポーラおよびモノポーラインストゥルメント	✓	✓	✓
アドバンスドエナジー	✓	✓	-
Firefly	✓	✓	✓
8mm エンドスコープ (0°および30°)	✓	✓	-
関節機能付きカメラ	-	-	✓
電気手術装置	✓	✓	✓

---

Capability enhancements	Da Vinci X	Da Vinci Xi	Da Vinci SP
広汎な解剖学的アクセス	-	✓	✓
Integrated table motion	-	✓	-
ブームローテーション	-	✓	✓
外部アーム干渉の排除	-	-	✓

販売名：da Vinci Xi サージカルシステム (承認番号：22700BZX00112000)  
販売名：da Vinci X サージカルシステム (承認番号：23000BZX00090000)  
販売名：da Vinci SP サージカルシステム (承認番号：30400BZX00220000)  
販売名：da Vinci SP インストゥルメント (承認番号：30400BZX00219000)  
販売名：da Vinci SP カメラ (認証番号：304ACBZX00010000)  
販売名：da Vinci SP ポートアクセサリ (認証番号：304ACBZX00013000)  
販売名：da Vinci SP アクセスポートキット (認証番号：304ACBZX00014000)  
販売名：da Vinci SP サージカルドレーブ (届出番号：13B1X10126000005)

詳細に関しては取扱説明書または添付文書等をご確認いただくか、  
以下のお問い合わせ先、または弊社営業担当へご確認ください。

#### お問い合わせ先

##### インテュイティブサージカル合同会社

東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル

Tel. (03) 5575 - 1419 (営業部) Tel. (03) 5575 - 1326 (マーケティング部)

Tel. (03) 5575 - 1362 (音声案内で3を選択) (0120) 56 - 5635 (音声案内で3を選択) (カスタマーサービス)

©2022 インテュイティブサージカル合同会社

無断複写・複製・転載を禁じます。製品名は各社の商標または登録商標です。